

MOTUS AZ+

La soluzione versatile per la
medicina estetica e la dermatologia





MōtusAZ+

La tecnologia laser potente e compatta

Motus AZ+ è il sistema laser che combina la lunghezza d'onda del laser Alessandrite, universalmente riconosciuta come la più efficace per trattamenti di epilazione, soprattutto per i peli fini e chiari, con l'innovativa tecnologia Moveo.

Motus AZ+ è dotato di un' ulteriore sorgente laser Nd:YAG che allarga le capacità di trattamento del sistema. Oltre all'epilazione laser, la doppia sorgente permette di trattare con efficacia i comuni inestetismi vascolari quali capillari e teleangectasie.

Il manipolo **Moveo**, disponibile sia per la sorgente Alessandrite che Nd:YAG, ha un puntale in zaffiro che, lavorando a contatto con la pelle, ottimizza l'effetto di trasmissione dell'energia riducendo in modo significativo l'effetto dell'indice di riflessione aria-cute.



Manipoli Moveo HR, PL, SR, VL



Dieci manipoli laser



Due lunghezze d'onda al servizio del professionista

Il laser Alexandrite raggiunge livelli di eccellenza grazie alle soluzioni tecnologiche introdotte con Moveo. L'interazione laser-tessuto è stata ottimizzata potenziando sensibilmente la trasmissione dell'energia, per una maggiore sicurezza ed un miglior comfort del trattamento.

Il **sistema di raffreddamento** integrato di Moveo riduce al minimo i rischi di effetti collaterali come ustioni superficiali o discromie.

Il manipolo Moveo utilizza la **tecnica "Multipass"** e fluenze ridotte su aree delimitate per ottenere un incremento graduale del riscaldamento dei follicoli piliferi fino al raggiungimento dell' end-point in modo sicuro ed efficace.

Il Manipolo **Moveo HR (hair removal)**, è stato progettato per trattamenti semplici, sicuri e indolori, dei fototipi chiari, ma anche e soprattutto dei fototipi scuri.

Il Manipolo **Moveo PL (pigmented lesions)** è stato ideato per il trattamento delle lesioni pigmentate benigne. Tramite riscaldamento progressivo della lentigo, viene ridotto al minimo il rischio di iperpigmentazioni o ipopigmentazioni post trattamento.

Il Manipolo **Moveo VL (vascular lesions)** è stato realizzato per il trattamento del rossore superficiale.

Il Manipolo **Moveo SR (skin rejuvenation)** con la tecnica multipass applicata a questo manipolo si ottiene il riscaldamento del derma e la promozione della neocollagenogenesi.



TRATTAMENTI



Lesioni pigmentate benigne



Skin Resurfacing



Epilazione



Lesioni Vascolari



Tecnologia innovativa

Motus AZ+ rende l'epilazione con il laser Alexandrite efficace, indolore e semplice: utilizzabile in tutti i fototipi ed in presenza di peli sottili e chiari, permette di ottenere eccellenti risultati riducendo al minimo il rischio di effetti collaterali discromici.

Il **riconoscimento automatico dello spot** facilita i cambiamenti delle diverse impostazioni di lavoro.

La sorgente Nd:YAG allarga il campo d'azione del sistema laser ai trattamenti vascolari con problematiche molto diffuse quali capillari, o teleangectasie.

I **10 manipoli con spot fino a 20 mm** consentono allo specialista di affrontare le diverse situazioni cliniche nei campi dell'epilazione tradizionale ("a stampo") e del trattamento delle lesioni vascolari o pigmentate superficiali benigne.

MANIPOLO
MOVEO

TECNICA
MULTIPASS

DUE
SORGENTI
LASER



Il **software intuitivo ed il database interno**, consentono una rapida scelta dei parametri di trattamento su qualsiasi fototipo, area e tipo di peli.



Il successo è nelle tue mani

Motus AZ+ sfrutta una tecnologia innovativa che potenzia le prestazioni del sistema, abbattendo i costi di manutenzione. L'assorbimento contenuto a 16A permette di sfruttare una comune presa di corrente senza modificare il proprio impianto elettrico. Motus AZ+ è lo strumento che permette di raggiungere obiettivi importanti e la completa soddisfazione del paziente.



“ Lavoro da diversi anni con vari tipi di sistemi laser. I trattamenti più richiesti sono senza dubbio quelli legati alla medicina estetica. Per questo motivo ritengo che Motus AZ+ sia davvero un prodotto innovativo per il nostro settore. Motus AZ+ è un sistema compatto dal potenziale enorme. Con la tecnologia Moveo è stato rivoluzionato il campo della laser epilazione medicale, l'introduzione della sorgente laser Nd:YAG ha permesso di fare un passo in avanti estendendo il campo applicativo alla rimozione degli inestetismi vascolari quali capillari e teleangectasie di gambe e del volto.”

Prof. Nicola Zerbinati
Dipartimento di Dermatologia
Università dell'Insubria - Varese, Italia

“ La rivoluzionaria metodica Moveo mi ha subito colpito per la sua particolarità e semplicità applicativa. Esaltare le lunghezze d'onda di 755 nm e 1064 nm, ottimizzando il trasferimento dell'energia, quindi in totale sicurezza, permette di avere, in tutta semplicità, trattamenti efficaci e pazienti soddisfatti. Motus AZ+ e la tecnologia Moveo hanno permesso al mio team di ottenere grandi risultati, con esperienze più che positive dei pazienti trattati anche su fototipi più scuri.”

Prof. Paolo Bonan, MD
ESLD Key Officer - EADV Laser Task Force
In Charge of Laser Cutaneous Cosmetic & Plastic Surgery Unit
Villa Donatello Clinic, Florence

RISULTATI PRE-POST




Prima



Dopo

Per gentile concessione del Prof. P. Bonan e della Dr.ssa M. Troiano

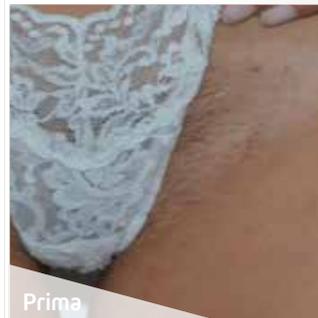

Prima



Dopo

Per gentile concessione del Prof. P. Bonan e della Dr.ssa M. Troiano




Prima




Dopo

Il trattamento è stato eseguito solo sulla gamba destra (non tatuata)
Per gentile concessione della Dr.ssa M. Troiano e del Prof. P. Bonan

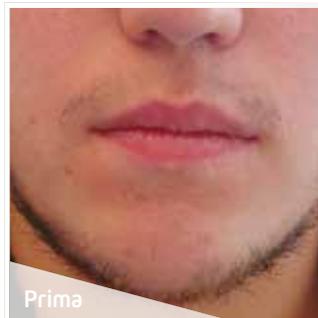

Prima

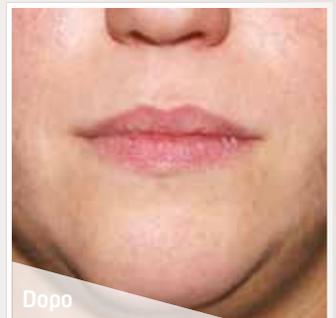

Dopo

Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati




Prima



Dopo

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi
Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan

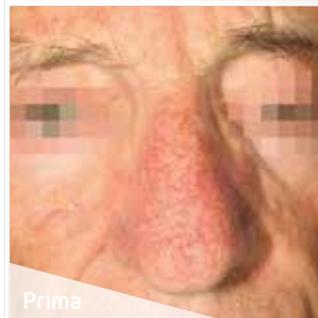

Prima



Dopo

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi
Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan




Prima




Dopo

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi
Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan

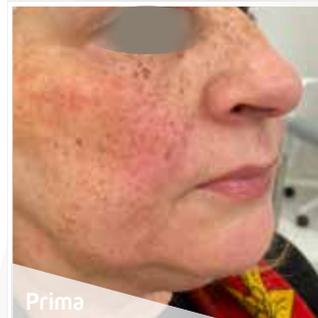

Prima

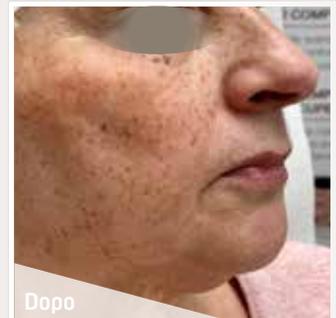

Dopo

Per gentile concessione della Dr.ssa G. Garofano

SPECIFICHE TECNICHE

Motus AZ+

Tipo di Laser	Alessandrite 755 nm	Nd:YAG 1064 nm
Diametro dello spot (manipoli opzionali)	Fino a 20 mm, (manipoli standard) Moveo HR, Moveo PL, Moveo SR, Moveo VL	
Dimensioni e peso	114 cm (A) x 45 cm (L) x 94 cm (P) - 100 Kg	
Alimentazione	230 Vac - monofase - 50-60 Hz - 16 A	

Questa brochure non è destinata al mercato statunitense.

PERICOLO - RADIAZIONE LASER VISIBILE E INVISIBILE

Evitare l'esposizione dell'occhio o della pelle alla radiazione diretta o diffusa
Apparecchio laser di classe 4



ATTENZIONE - Radiazione Laser

CE
0123

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

Seguici su



www.renaissancelaser.it

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com



Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso. Riservato ai professionisti sanitari.

ELEN[™]
www.e-len.com